



Front view
Silencer-SL Mandibular advancement splint
医療機器承認番号：14B1X00011000572


調整機能付き スリープスプリント サイレンサーSL

就寝時に装着・いびきの症状を改善

「サイレンサーSL」は、ダブルS状スロットコネクタを採用。自由にスライドすることで水平的運動性能が向上。コネクタに加わる過度な負担を回避し、装置の耐久性を向上させました

オールインワンシステム

専用ゲージで下顎前突位（構成咬合位）を記録できます

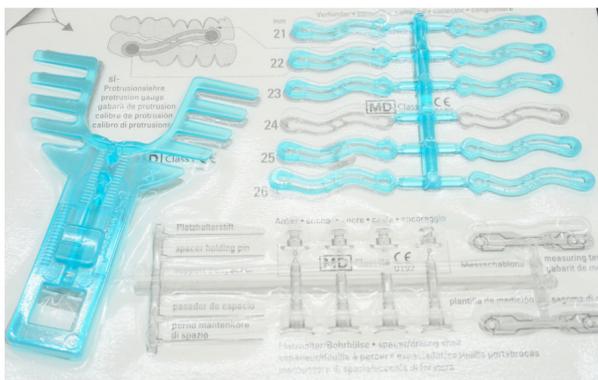

※point

上下顎の習慣性咬頭筈合位が記録できます。また、ポジショニングのバイト採得もできます

上下分離式

過度な負荷をダブルS状コネクターが軽減して装置の破損を防ぎます



※point

ダブルS状スロットコネクターはサイズの違う全6種が同梱（21mm/22mm/23mm/24mm/25mm/26mm）

装着性の向上

ハードとソフトの2重構造シートを採用。装着感と安定性が向上しました



※point

上顎は2重構造（外側ハードシート、内面ソフトシート）・下顎は3mmのハードクリアシートを使用

